

PANORAMICA DENTALE



**SISTEMI
TAVOLI
OPERATORI**

**SEDIE E
SGABELLI
CHIRURGICI**

**ELEMENTI
CHIRURGIA
DENTALE**

BRUMABA

OPERATING TABLE SYSTEMS

ITALIA

Da oltre 40 anni i nostri tavoli operatori e sedie Brumaba sono stati progettati a beneficio di chirurghi e pazienti.

Basandosi sull'esperienza di migliaia di cliniche e ambulatori in tutto il mondo, i nostri prodotti si adattano in modo ottimale a tutte le fasi del trattamento chirurgico. Ogni tavolo operatorio e sedia Brumaba è Made in Germany ed è sinonimo di qualità comprovata nel design, nella tecnologia, nei materiali e nell'ergonomia.



INDICE

SALA MICROCHIRURGIA DENTALE

Sala Microchirurgia dentale | p. 4 - 5

TAVOLI OPERATORI

Tavolo Operatorio | p. 6



Tavolo Operatorio | p. 7



ELEMENTI CHIRURGIA DENTALE

Unità dentale | p. 8

U 3000 F



Unità idrica | p. 9

U 742



ELEMENTI CHIRURGIA DENTALE STAND ALONE

Unità dentale | p. 10

P3 CART



Unità idrica | p. 10

MASTER VAC



CARRELLI PORTA ATTREZZATURE

Carrello | p. 11

DEMED E5



Mini carrello | p. 11

DEMED PX3



SISTEMA LAMPADA SCIALITICA

Sistema lampada scialitica | p. 12 - 13

B-LIGHT 160



SEDIE CHIRURGICHE

Sedia Chirurgica | p. 14

BALANCE ADVANCE



Sedia Chirurgica | p. 15

BALANCE



Sedia Chirurgica | p. 15

BALANCE SUPREME



STRUMENTARIO CHIRURGICO

Strumentario chirurgico | p. 16 - 17


USTOMED



PANNELLI UMANIZZATI

Illuminazione | p. 18

SKY CEILINGS

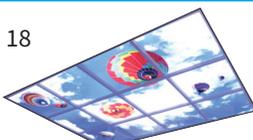



NEW LAYOUT

SALA MICROCHIRURGIA DENTALE

L'innovativo layout di sala che propone soluzioni avanzate per la chirurgia e microchirurgia in ambito dentale.



IL NUOVO APPROCCIO CHIRURGICO

Il classico riunito viene oggi sostituito da componenti singoli che portano il massimo vantaggio nel posizionamento e nell'ergonomia sia dei pazienti che degli operatori, questo permette di svolgere attività di chirurgia avanzata che fino ad ora non era possibile fare con gli approcci tradizionali.



IL MIGLIORE DELLA CLASSE

La speciale funzione tilt laterale di 17° e la regolazione di altezza estrema permettono di lavorare comodamente in ogni posizione.



TAVOLO OPERATORIO

PRIMUS

CARATTERISTICHE

- » Colonna telescopica 520-950 mm
- » Tilting laterale
- » Funzione memoria con 8 programmi
- » Sezione testa telescopica con poggiatesta a forma di ferro di cavallo
- » Massima mobilità con l'opzione mobile
- » Pacco batteria 24 V CC
- » Telecomando
- » Estensione della sezione posteriore per la regolazione della lunghezza
- » Costruzione in acciaio inossidabile

OPZIONE MOBILE



2-GUIDE-DRIVE - PRIMUS

- » Due ruote direzionali
- » Due ruote girevoli, con sistema di sollevamento-freno

4-EASY-DRIVE - PRIMUS

- » 4 ruote girevoli, con sistema di sollevamento-freno
- » Guida intelligente direzionale
- » Ruote sterzanti 120 mm
- » Massimo spazio per le gambe degli operatori

ALTEZZA COMODA DI SEDUTA



TILTING LATERALE



MIGLIOR ACCESSO POSSIBILE



UN GENIO NEL SUO SEGMENTO

Se hai bisogno di qualità e robustezza, allora GENIUS è la scelta migliore. La soluzione entry level di BRUMABA.



TAVOLO OPERATORIO

GENIUS

CARATTERISTICHE

- » Colonna telescopica GENIUS da 580-870 mm
- » Sezione testa telescopica con poggiatesta a ferro di cavallo
- » Funzione di memoria con 8 programmi
- » Funzione di rete da 230 V
- » Estensione della sezione schiena per la regolazione della lunghezza
- » Telecomando
- » Costruzione in acciaio inossidabile

Opzionale:

- » Funzionamento a batteria 24V DC
- » Colonna doppia telescopica GENIUS da 520-950 mm
- » Comando a pedale

OPZIONE MOBILE



2-GUIDE-DRIVE "CL" - GENIUS

- » Due ruote direzionali
- » Due ruote girevoli, con sistema di sollevamento-freno



4-EASY-DRIVE - GENIUS

- » 4 ruote girevoli, con sistema di sollevamento-freno
- » Guida intelligente direzionale
- » Ruote sterzanti 120 mm
- » Massimo spazio per le gambe degli operatori

MOBILITÀ ECCELLENTE



ACCESSO PERFETTO



SI ADEGUA ALLA TUA POSIZIONE






UNITÀ DENTALE

U 3000 F

ELEMENTO DENTALE: U 3000 F

- » Stoccaggio per 2 vassoi standard. Display digitale, tutte le funzioni sono controllate e accessibili tramite il comando a pedale wireless.
- » Dotato di siringa aria acqua, micromotore, turbina, tutti con supporti removibili e autoclavabili
- » Tubo di alimentazione da 2,5 m, lavaggio RKI.
- » Scatola di derivazione universale
- » Con interruttore centralizzato, riscaldamento dell'acqua calda, alimentazione a bassa tensione.



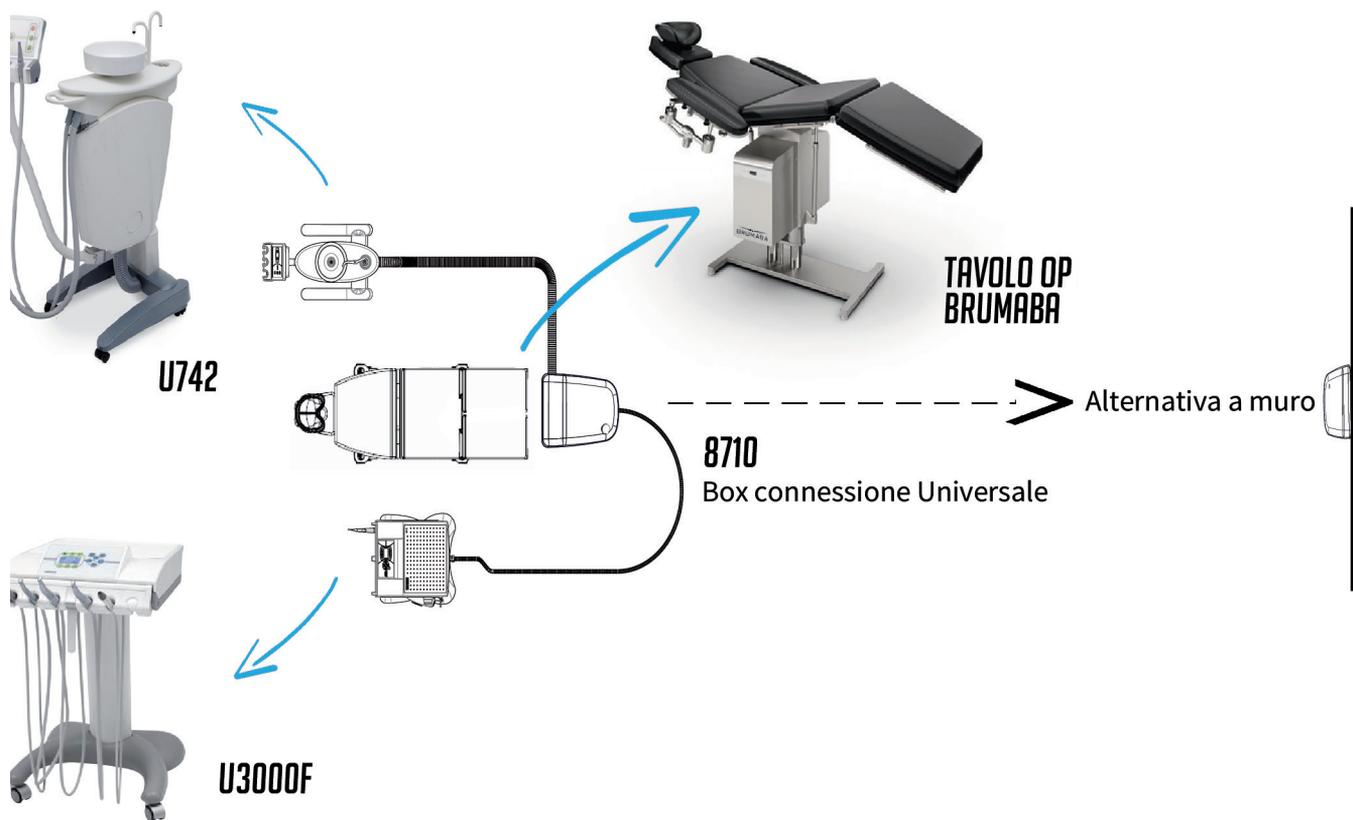

UNITÀ IDRICA

U 742

GRUPPO IDRICO U 742

- » Gruppo acqua mobile con selettore di posizione (valvola di aspirazione del flusso), vasca estraibile in ceramica bianca, riempibicchiere e risciacquo vasca.
- » Predisposta per l'installazione di una sputacchiera alternativa.
- » Separazione automatica o separatore di amalgama.
- » Scatola di derivazione universale:
- » Interruttore centralizzato, riscaldamento dell'acqua calda, alimentazione a bassa tensione.





UNITÀ DENTALE E IDRICA STAND ALONE



UNITÀ DENTALE

P3 CART

P3 CART: il carrello autonomo per trattamenti ad elevato comfort

- » Carrello a funzionamento autonomo con compressore oil-free integrato e serbatoio acqua nebulizzata
- » Strumenti selezionabili liberamente e possibilità di raggiungere le massime prestazioni anche in funzionamento continuo.


UNITÀ IDRICA

MASTER VAC

L'elegante MASTER-VAC: il carrello aspirante completamente autonomo ad alta funzionalità

- » Operazione continua
- » Performance completa
- » Plug & play
- » Mobile
- » Sputacchiera in ceramica, posizionabile in modo flessibile tramite un braccio, può essere posizionata direttamente sotto la bocca del paziente.
- » Nessun costoso lavoro di installazione e il miglior comfort grazie a vantaggi unici.

CARRELLI PORTA STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE

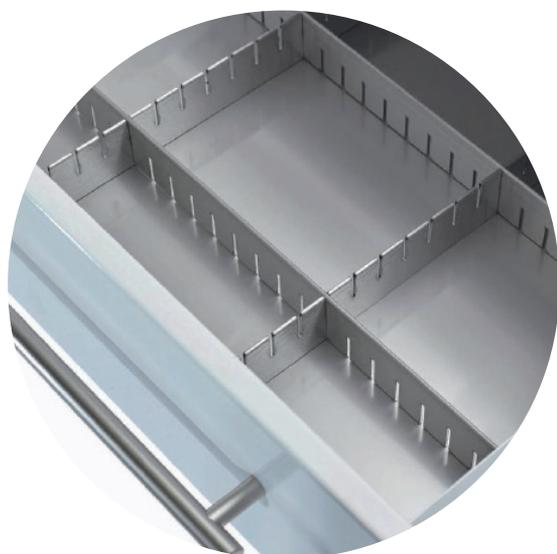

DEMED PX3

Mini carrello
compatto,
piccolo e
flessibile



DEMED E5

Carrello per
attrezzature
mobile e
compatto



SISTEMA LAMPADA SCIALITICA

B-LIGHT 160


B-LIGHT, semplicemente un capolavoro
Un'illuminazione che non abbaglia crea una condizione di rilassamento visivo, riduce l'affaticamento e aumenta l'attenzione.

B-LIGHT utilizza una luce bianca, 7 temperature di colore con solo LED bianchi, al fine di evitare fastidiose ombre colorate. Il riflettore è sottile e facile da manovrare. Un sistema elettronico attiva un gruppo di LED supplementari che, riflessi sulle ottiche, creano due diametri differenti di luce.


CARATTERISTICHE

- » Elevata resa cromatica (96 CRI)
- » Luce anti-abbagliamento, lenti in PMMA ottico e specchi brillanti ad alta riflessione
- » Possibilità di attivare la Funzione Endoled: una luce soffusa illumina l'area di lavoro
- » Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec) 160.000 lux
- » Diametro della lampada 52 cm
- » Temperatura colore (7 selezioni) da 3.800 a 5.000 K
- » Indice di resa cromatica (CRI) 96 Ra
- » Regolazione del diametro Elettronica



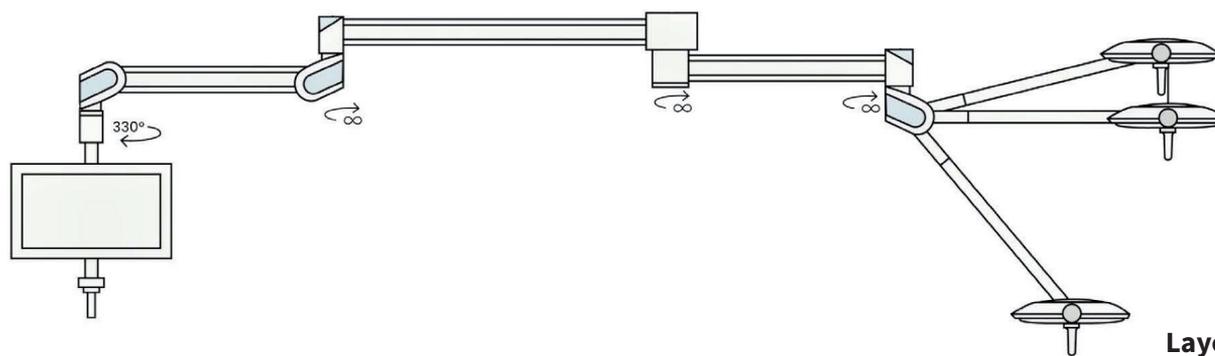

Layout 1

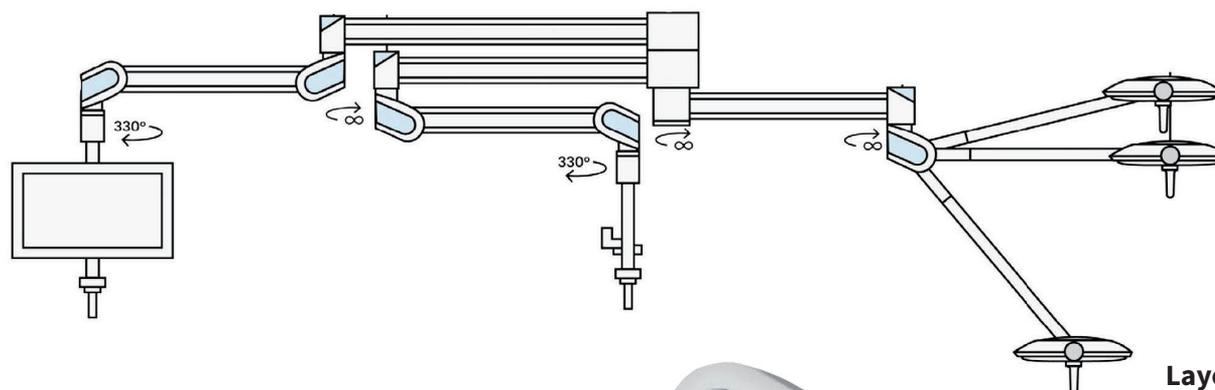

Layout 2

DIVERSE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Il sistema lampada è personalizzabile e configurabile in base ad ogni tipologia di esigenza:

Lampada scialitica + braccio porta monitor (Layout 1)

Lampada scialitica + braccio porta monitor + braccio porta telecamera (Layout 2)



LO SPECIALISTA PER LA MICROCHIRURGIA

Crea la tua posizione di seduta perfetta - con i braccioli regolabili in tre dimensioni e la seduta brevettata. La schiena dell'operatore è sempre in posizione corretta. Si mantengono sterili le mani regolando semplicemente l'altezza tramite il pedale. Componenti di alta qualità garantiscono una lunga durata del prodotto.



MODELLI **BALANCE
F&B**
con regolazione
in altezza tramite
l'attivazione con il
pede e freno

**BALANCE
ADVANCE F**
con regolazione
in altezza tramite
l'attivazione con il
pede

SEDIA CHIRURGICA

BALANCE ADVANCE

CARATTERISTICHE

- » Braccioli regolabili in tre dimensioni
- » Fissaggio stabile e senza gioco di posizione del bracciolo
- » Regolazione di altezza da 590-790 mm
- » Freno centrale tramite l'attivazione con il piede
- » Schienale regolabile con supporto lordosi
- » Forma di seduta brevettata con angolo di seduta regolabile
- » Comfort con ruote antistatiche
- » Qualità prodotta con materiali di alta qualità
- » Design attraente

DATI TECNICI

5 ruote in poliuretano, di cui una conduttiva	Ø 65 mm
Regolazione altezza	590 - 790 mm
Inclinazione dello schienale	+6° / -16°
Grado inclinazione del cuscino dello schienale	25°
Regolazione dell'altezza dello schienale	100 mm
Inclinazione del sedile	+5° / -8°
Dimensioni seduta (W x H x D)	460 x 60 x 420 mm
Peso	20.3 kg
Carico massimo	120 kg

REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE



MATERIALI DI ALTA QUALITÀ



SCHIENALE REGOLABILE



MODELLI

BALANCE F&B

con regolazione in altezza tramite l'attivazione con il piede e freno



BALANCE F

regolazione in altezza tramite l'attivazione con il piede

MODELLI

BALANCE SUPREME F&B

con regolazione in altezza tramite l'attivazione con il piede & freno



BALANCE SUPREME F

con regolazione in altezza tramite l'attivazione con il piede



SEDIA CHIRURGICA

BALANCE

CARATTERISTICHE

- » Regolazione flessibile in altezza da 480 a 680 mm
- » Forma della seduta brevettata con angolo di seduta regolabile
- » Schienale regolabile con supporto lordosi
- » Costruzione di alta qualità con ruote frenanti, ruote antistatiche e girevoli, antitraccia
- » Attivatori a piede facili da azionare per regolare l'altezza del sedile senza perdita di sterilità

SEDIA CHIRURGICA

BALANCE SUPREME

NUMEROSE REGOLAZIONI DELLA SEDUTA




PREVIENE DOLORI ALLA SCHIENA



FUNZIONE DI FRENATURA (OPZIONALE)



STRUMENTO CHIRURGICO USTOMED

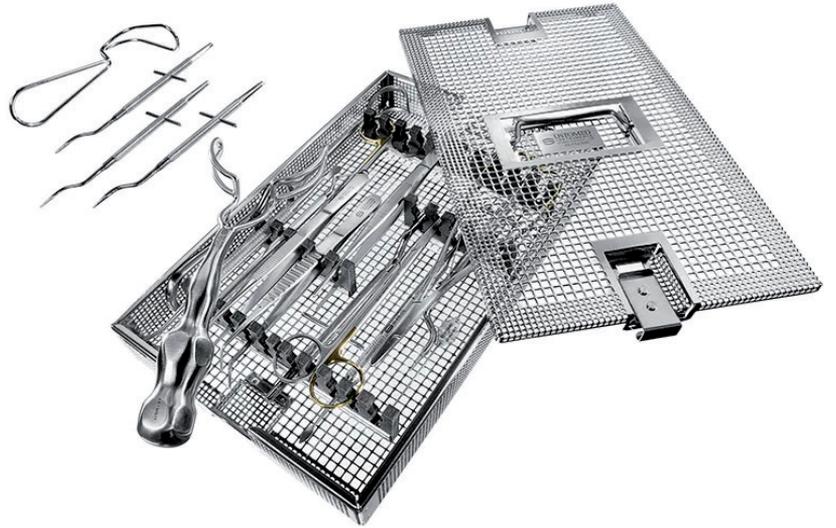

SHOP ONLINE

Scansiona il QR code e
acquistali direttamente Online!

MICRO STRUMENTI ULTRA-LIGHT



SET FISSAGGIO OSSEO

Precisione
e affidabilità nello
studio odontoiatrico
da oltre 45 anni.



SHOP ONLINE


Scansiona il QR code e
acquistali direttamente Online!



SET-PIN IN TITANIO






ILLUMINAZIONE SKY CEILINGS


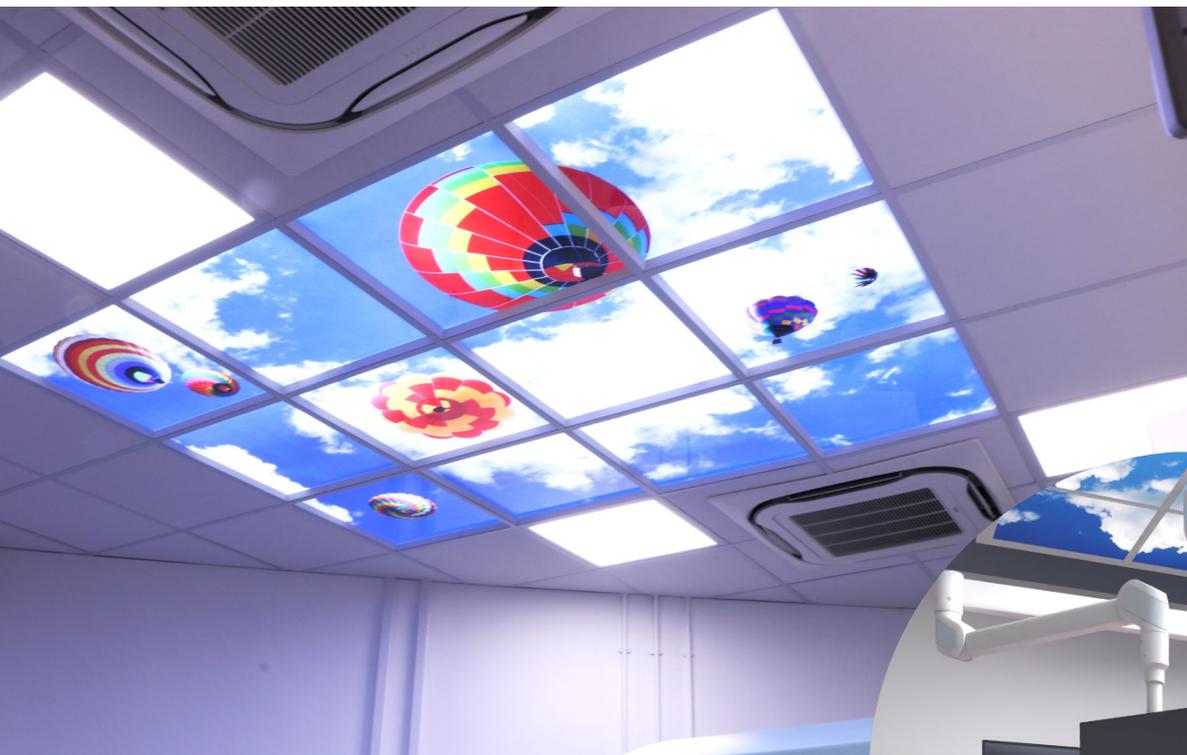


- » Splendide immagini di cieli ad alta risoluzione per un effetto tridimensionale, realistico e sensazionale.
- » Illuminazione naturale, bilanciata e a basso consumo, con comodo reostato manuale e programmazione avanzata (opzionale).
- » Modulari e compatibili con strutture per controsoffitti disponibili in Italia e all'estero.
- » Disponibili sia in forme e dimensioni standard che su misura.
- » Accessibili e convenienti. Forniti completi di corpi illuminanti.
- » Sistema a LED RFreeLux™ per ambienti MRI.

L'ARTE DELL'ILLUMINAZIONE

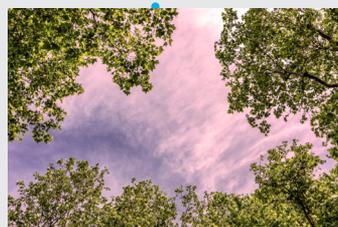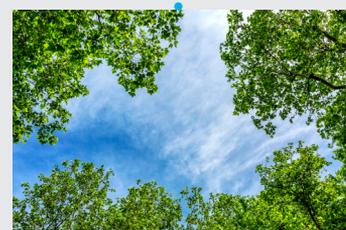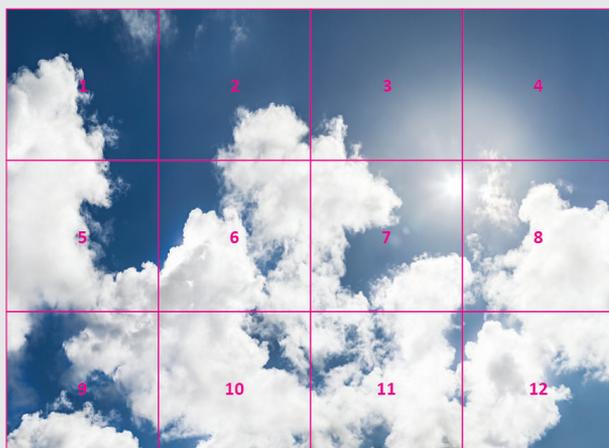

Gli Sky Ceiling possono essere programmati per simulare i cicli giornalieri e stagionali del cielo, dall'alba al tramonto.

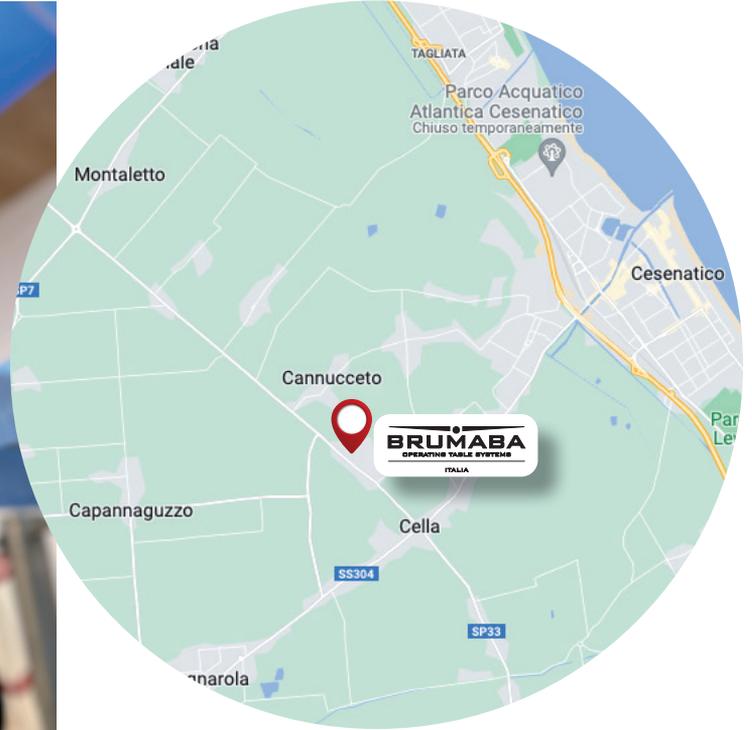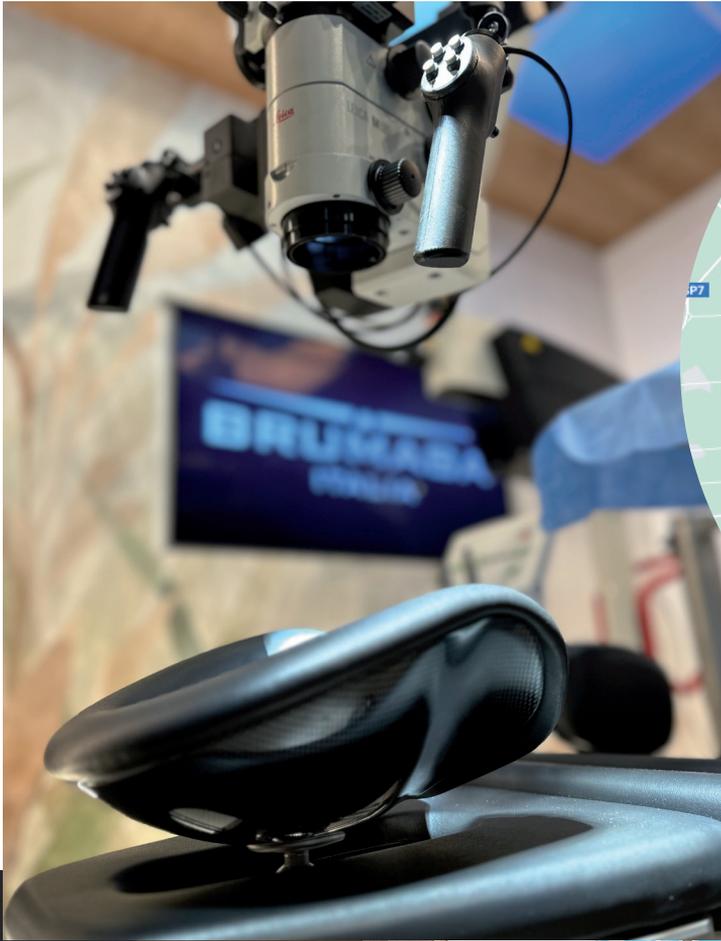

VISITA IL NOSTRO SHOWROOM
Via Dei Tigli, 6 • Cesenatico



DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED
SINCE 1980  **MADE IN GERMANY**



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti,
scansiona il QR code

BRUMABA ITALIA S.r.l.

Via Dei Tigli, 6

47042 Cesenatico (FC)

Tel: +39 0547 1932205

Fax: +39 0547 402688

Mail: info@brumabaitalia.it

Web: www.brumabaitalia.it

PANORAMICA DENTALE

SISTEMI
TAVOLI
OPERATORI

SEDIE E
SGABELLI
CHIRURGICI

ELEMENTI
CHIRURGIA
DENTALE

QUALITÀ CERTIFICATA

WWW.BRUMABAITALIA.IT